



WorldMedic™



คู่มือการใช้ Software
SmartBackup®
Backup Management System
ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานด้านสำรองข้อมูล

SMCLINICEBACKUP-19092014-THA

จัดทำโดย

บริษัท เวิลด์เมดิค อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเวิลด์เมดิค ซ. รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2949-7816-20 โทรสาร 0-2949-7816-20 ต่อ 14

Call Center: 0-2949-7806

Email: worldmedic@worldmedic.com

Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

WorldMedic Information & Technology Co.,Ltd.

No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.

Kannayao Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14

Call Center: 0-2949-7806

Email: worldmedic@worldmedic.com

Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

Care Center: www.carecenter.worldmedic.com

Service Center

Call Center: 0-2949-7806

Email: worldmedic@worldmedic.com / Support@worldmedic.com

Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

Software Center: www.software.worldmedic.com

Care Center: www.carecenter.worldmedic.com

Training Center: www.training.worldmedic.com

Document Center: www.manual.worldmedic.com

Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com

Support Live Chat: www.software.worldmedic.com/chat

Buy Software & Accessory: www.mbmmed.worldmedic.com

Specific Website: <http://www.smartclinic.info/>

Software Download: <http://www.worldmedicdownload.info>

คำเตือน ซอฟต์แวร์นี้ ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายลิขสิทธิ์ และสิทธิทางปัญญา การทำซ้ำ หรือ แจกจ่ายโปรแกรมหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของโปรแกรมอาจได้รับโทษทั้งทางแพ่ง และอาญาและต้องระวางโทษตามที่กฎหมายระบุไว้สูงสุด

คำนำ

ในนามบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ **SmartBackup 1.0** **ทดลองครบรอบ 15 ปี** สำหรับใช้สำรองข้อมูลของซอฟต์แวร์ SmartClinic Nice Group ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์หลัก เพื่อให้ผู้ใช้งานมีระบบสำรองข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และทำงานแบบอัตโนมัติ ไว้ในกรณีที่ข้อมูลในไดรฟ์ C สูญหายหรือฟอร์แมตเครื่องใหม่เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ก็สามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ต่อไปได้ทันที ที่ผ่านมา การสำรองข้อมูล ผู้ใช้จะต้องทำการสำรองข้อมูลเอง หากลืมหรือไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีข้อมูลที่จะนำกลับมาใช้ได้


SmartBackup 1.0 **ทดลองครบรอบ 15 ปี** เป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งของทีมงานที่จะช่วยทำให้ร้านยาที่มีระบบสำรองข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ร้านยาเครือข่าย หรือร้านยาคุณภาพ ได้โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานที่ทีมงานได้พัฒนาขึ้นสำหรับร้าน

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์สมาร์ตแบ็กอัพ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแพทย์ไทยจะก้าวไกล ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย

ทีมงานเวิลด์เมดิค

การติดตั้ง

1. ดาวน์โหลด SmartBackup ได้แล้ว ให้เปลี่ยนชื่อให้เป็น **SmartBackup.exe** แล้วนำไปวางไว้ที่
C:\SmartGroup\SmartClinic Nice BPC (หรือชื่อโฟลเดอร์ตามซอฟต์แวร์แต่ละตัว)
2. เลือกไฟล์ SmartBackup.exe กด Send to เลือก Send to Desktop เพื่อให้สะดวกในการกดเปิดเรียกใช้งาน

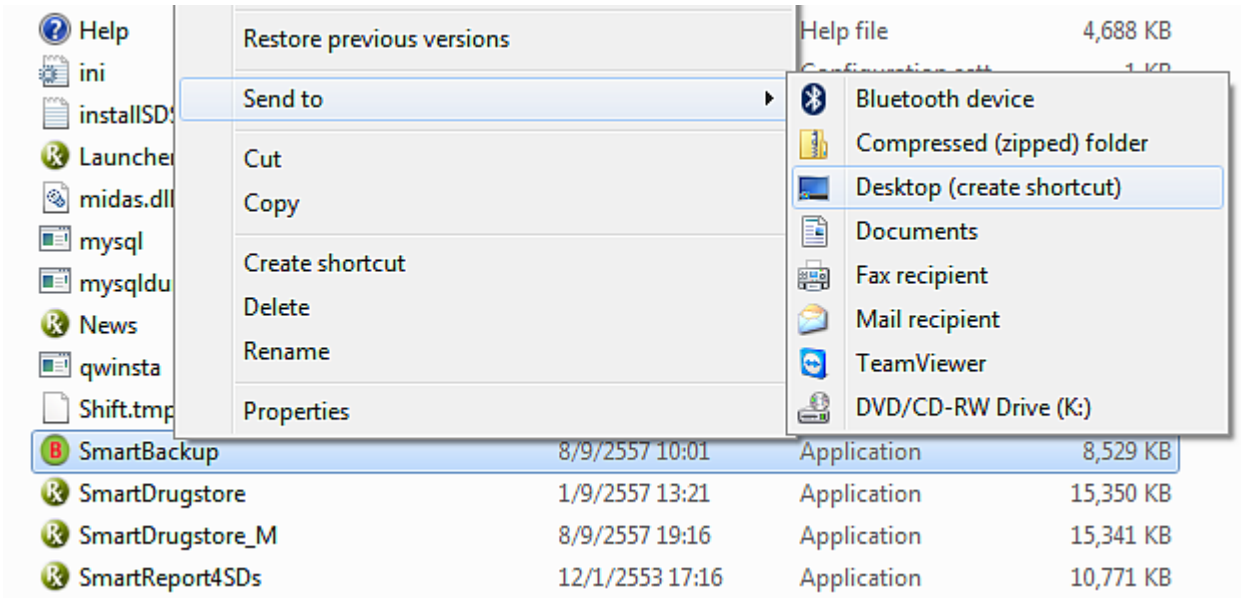

เริ่มต้นใช้งาน

1. Doubleclick ไอคอน SmartBackup เพื่อเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมา ใส่รหัสผ่าน ที่ช่อง “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”




ชื่อผู้ใช้ admin

รหัสผ่าน admin

เริ่มต้นใช้งาน

หน้าหลัก

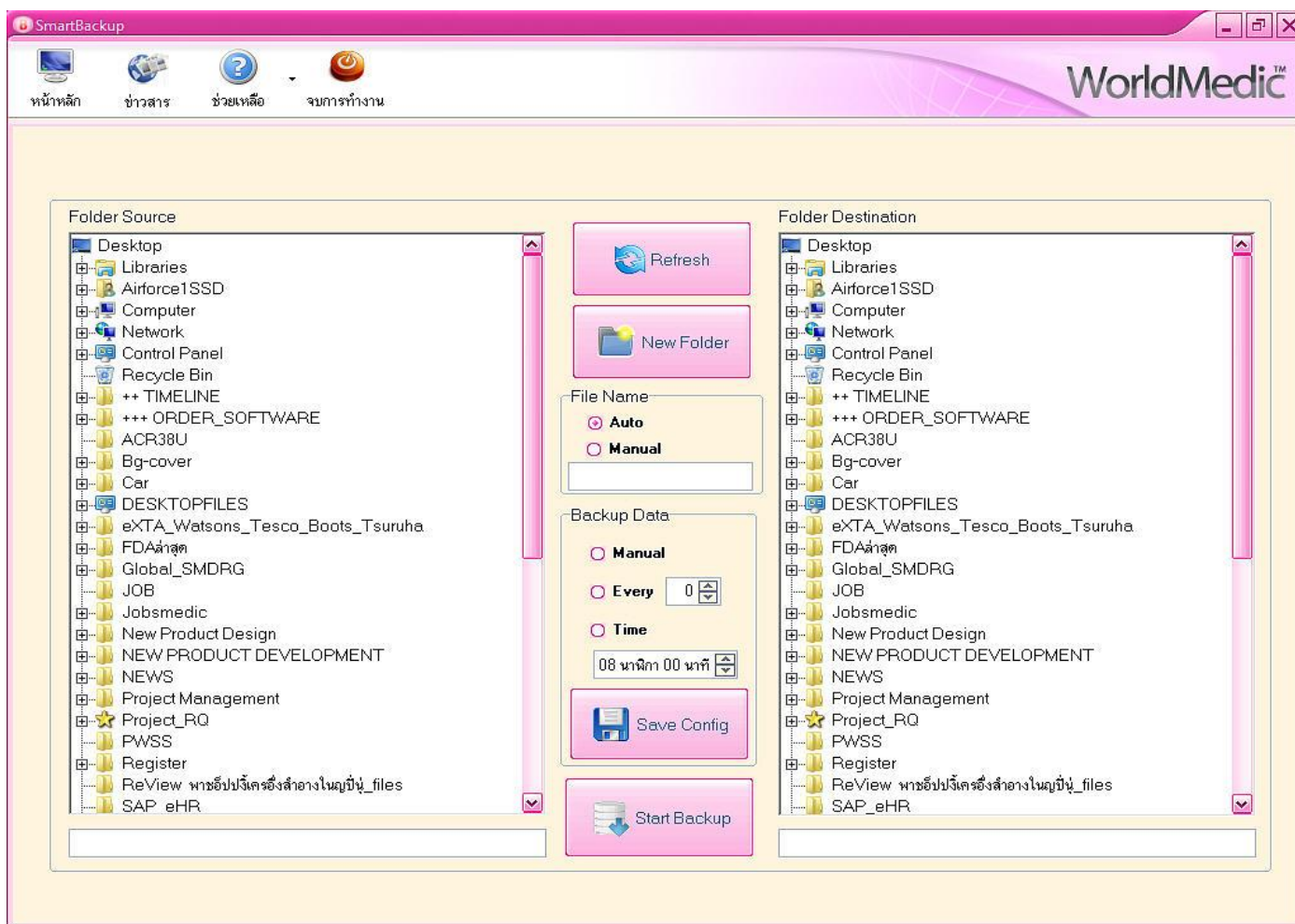

หน้านี้เป็นหน้าหลักในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่อง ซ้ายและขวา ช่องด้านซ้ายคือ ช่องให้เลือกโฟลเดอร์ที่การจะสำรองข้อมูล (Folder Source) และ ช่องด้านขวามือคือ ช่องสำหรับจะจัดเก็บโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูล (Folder Destination)

วิธีการใช้งาน

1. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูลช่องซ้ายมือ สำหรับ SmartClinic Nice BPC คือ โฟลเดอร์ clncwmd เลือกแล้วสังเกต ช่องด้านล่างจะแสดงเป็น C:\mysql\data\clncwmd หรือ โฟลเดอร์อื่นตามชนิดของซอฟต์แวร์ แสดงว่าท่านเลือกถูกต้อง
2. ท่านสามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองได้ โดยเลือกได้ 2 แบบคือ
 - **Auto** คือ ระบบจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้อัตโนมัติ โดยจะเอาวันเดือนปีและเวลา มาสร้างเป็นชื่อโฟลเดอร์ เช่น 1408091234 หมายถึง โฟลเดอร์นี้ ได้รับการสำรองข้อมูลเวลา 12.34 น. วันที่ 8 เดือน กันยายน 2557 ข้อมูลนี้มีประโยชน์เพราะหากท่านต้องการนำโฟลเดอร์ที่สำรองข้อมูลกลับมาใช้งานต่อ ท่านจะทราบได้ทันทีว่า โฟลเดอร์ใดที่มีข้อมูลที่อัปเดตที่สุด (แบบนี้สะดวก และนิยมมากที่สุด)
 - **Manual** คือ ตั้งชื่อโฟลเดอร์เอง โดยคลิกเลือกที่ Manual แล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์ตามความต้องการ

3. เลือกไดรฟ์ที่ต้องการเก็บไฟล์เตอร์ที่ต้องการสำรองทางช่องขวามือ ท่านสามารถเลือกไฟล์เตอร์ที่มีอยู่แล้วในแต่ละไดรฟ์ หรือเลือกเก็บใน Thumb Drive หรือ External Harddisk หรือ สามารถสร้างไฟล์เตอร์เก็บขึ้นมาใหม่โดยเลือกไดรฟ์ที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม **“New Folder”** เพื่อสร้างและตั้งชื่อได้ตามต้องการ เช่น สำรองข้อมูล-SMCLINICE หรือ Backup_SMCLINICE เป็นต้น
4. เมื่อเลือกไฟล์เตอร์ต้นทางและ ปลายทางได้แล้ว ให้กดปุ่ม **“Save Config”**
5. การสำรองข้อมูล (Backup) สามารถเลือกได้ 3 แบบคือ
 - Manual คือ สำรองข้อมูลเอง ตามต้องการที่ปุ่ม **“Start Backup”** ไม่ว่าเวลาไหนก็ได้
 - Every [] คือ การสำรองข้อมูลทุกๆ กี่นาที ข้อดีคือ ข้อมูลจะมีการสำรองข้อมูลอัปเดตมากที่สุด แต่อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มีภาระการทำงานหนัก หรือทำให้เครื่องช้าได้
 - Time [] คือ การสำรองข้อมูลแบบตั้งเวลาล่วงหน้า เช่น เวลา 20.00 น. หรือ 21.00 น. ก่อนเวลาปิดร้าน แบบนี้จะนิยมกันมากที่สุด เพราะจะเป็นการช่วยสำรองข้อมูลในแต่ละวัน ก่อนปิดร้าน และไม่รบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์

วิดีโอการใช้งานได้ที่

<http://www.software.worldmedic.com/software-upgrade-center/index.html>

เว็บไซต์ SmartClinic

www.smartclinic.info

Technical Support

ติดต่อ Technical Support

โทรศัพท์ 0-2949-7816-20 ต่อ 11, 12, 13

ติดต่อวันหยุดราชการ Holiday Call

-  **MB1:**085-121-4151 (Staff): SMS Available
-  **MB2:**085-076-2828 (Staff): SMS Available
-  **MB3:**085-199-2291 (Staff): SMS Available
-  **MB4:**088-208-5130 (Staff): SMS Available
-  **MB5:**099-245-5275 (Staff): SMS Available

ติดต่อ Call Center

โทรศัพท์ 0-2949-7806 Call Center Website ::: www.9497806.com

ติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2949-7816-20 ต่อ 11 12 13

ติดต่อเว็บบอร์ด

<http://www.software.worldmedic.com/webboard/webboard.php>

ติดต่อบริษัทฯ

บริษัท เวิลด์เมดิค อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเวิลด์เมดิค ซ. รามอินทรา 42/1 ถ. รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0-2949-7816-20 โทรสาร 0-2949-7816-20 ต่อ 14

WorldMedic Information & Technology Co.,Ltd.

No.1 WorldMedic Bldg. Ramindra 42/1 Ramindra Rd.

Kannayao Bangkok 10230 Thailand.

Tel. 0-2949-7816-20 Fax. 0-2949-7816-20 Ext. 14

Call Center: 0-2949-7806 Call Center Website : www.9497806.com

Email: worldmedic@worldmedic.com / Support@worldmedic.com

Website: www.worldmedic.com / www.worldmedic.co.th

Software Center: www.software.worldmedic.com

Care Center: www.carecenter.worldmedic.com

Training Center: www.training.worldmedic.com

Document Center: www.document.worldmedic.com

Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com

Support Live Chat: www.software.worldmedic.com/chat

Specific Website: www.smartclinic.info

Software Download: <http://www.worldmedicdownload.info>